



Modèles de Portes
Vitrées et Solides
Disponibles



HYC-85GD/FD



Niveau sonore



Consommation d'énergie



Charnière de porte réversible

Réfrigérateur de Pharmacie

Champ d'Application

Utilisé pour le stockage de médicaments, de vaccins, de réactifs, de produits biologiques et d'autres articles nécessitant une température comprise entre 2 et 8°C dans les hôpitaux, les pharmacies, les usines pharmaceutiques, les cliniques et les laboratoires, etc.

Conception Innovante

- Joint magnétique pour une étanchéité positive
- Alarmes multiples pour une surveillance plus sûre
- Contrôleur à microprocesseur, affichage avec résolution de 0,1°C

Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd.

No.280 Feng Yuan Road, High-tech Zone,
Qingdao, 266111, P.R. China
E-mail: inquiry@haierbiomedical.com
Website: www.haiermedical.com



Haier Biomedical
International



Haier Biomedical
International



@haiermedicalint



Haier Biomedical
International



Haier Biomedical
International

Avantages du Produit



Réfrigérant écologique à base d'hydrocarbures (R600a) et isolation en polyuréthane sans CFC pour réduire le réchauffement de la planète



USB et RS485 en option, pour faciliter l'exportation des données de température



Excellentes performances: uniformité de la température $\leq 1,5^{\circ}\text{C}$ ^①



Fonctionnement silencieux: 35dB (A)



Charnière de porte réversible

* ① Testé par TUV selon DIN13277



HYC-85GD:

Anti-condensation intelligente: Porte en verre trempé à triple vitrage avec chauffage du cadre de la porte, réduisant efficacement la condensation même à une température ambiante de 32°C et 80% d'humidité relative

HYC-85FD:

Porte solide sans CFC, isolation très efficace



Compresseur hermétique, circulation d'air forcée et dégivrage automatique pour garantir une haute performance de refroidissement



Contrôleur à microprocesseur, affichage avec résolution de 0,1°C



Alarmes multiples pour une surveillance plus sûre



Joint magnétique pour une étanchéité positive

Pièces du Produit

Charnière réversible

Poignée de porte intégrée

Simulateur de produit

HYC-85GD:
Porte en verre trempé à trois couches
HYC-85FD: Porte solide

Joint magnétique

Lumière LED


Deux ventilateurs

Hublot, permettant aux utilisateurs de tester facilement la température intérieure


Étagères réglables

1 Panier de rangement pratique


Pieds réglables

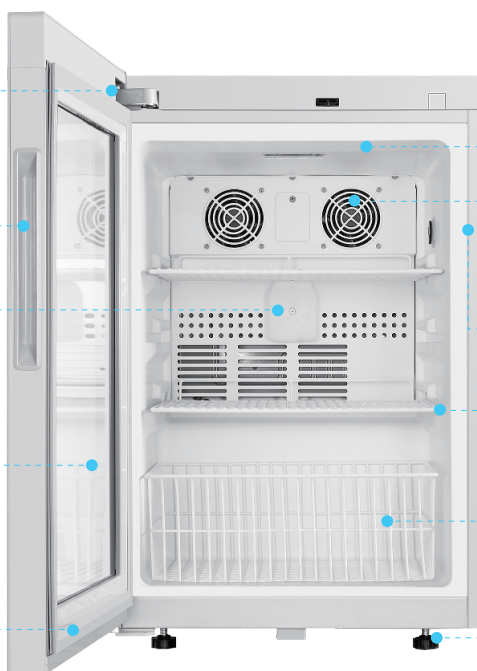

Température de l'Armoire

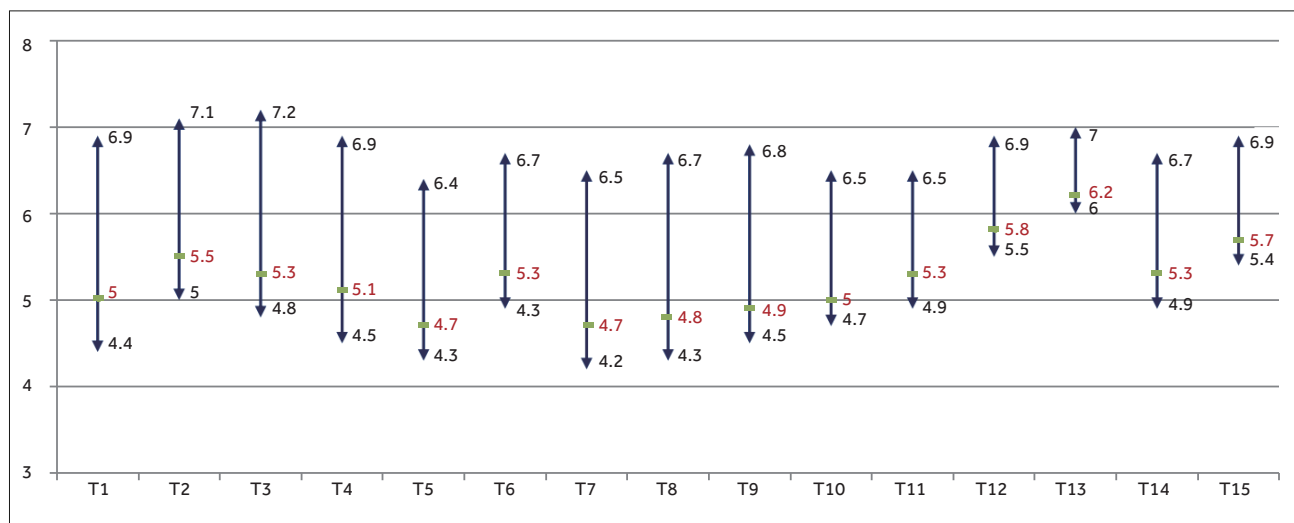

HYC-85GD

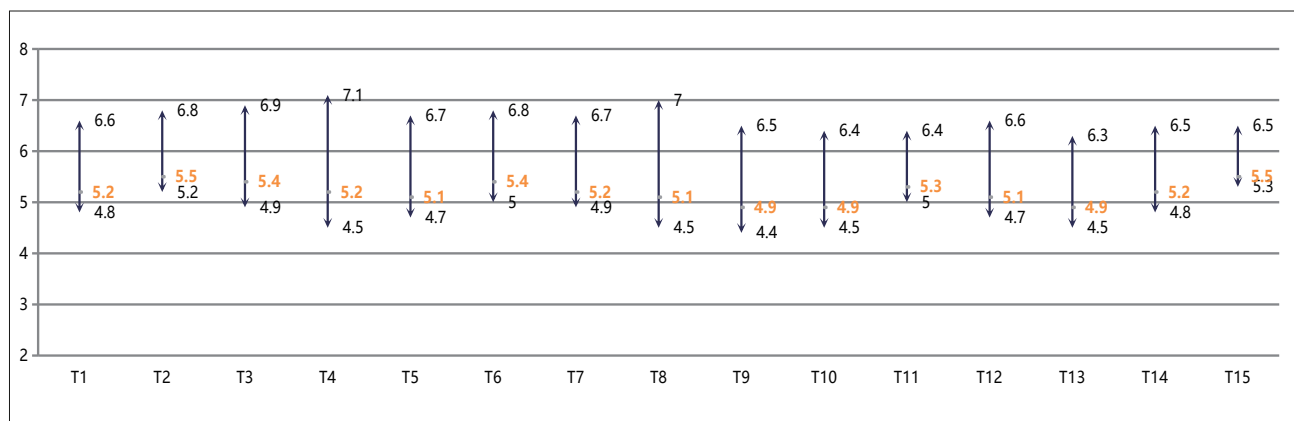

HYC-85FD

■ Moyenne ↑ Incertitude de mesure élargie

* Testé par TUV selon DIN13277 (Température ambiante: 25°C Point de consigne: 5°C sans charge)

Spécifications



Modèle			HYC-85GD	HYC-85FD
Données techniques	Type d'armoire		Comptoir / Sous-comptoir, Porte en verre	Comptoir / Sous-comptoir, Porte solide
	Classe climatique (°C)		N, 16-32	N, 16-32
	Type de refroidissement		Refroidissement par air forcé	Refroidissement par air forcé
	Mode de dégivrage		Auto	Auto
	Réfrigérant		R600a	R600a
	Niveau sonore (dB(A))		35	35
Performance	Plage de température (°C)		2-8	2-8
Contrôle	Le ventilateur s'arrête-t-il automatiquement à l'ouverture de la porte?		Y	Y
	Contrôleur		Microprocesseur	Microprocesseur
	Affichage		LED	LED
Données électriques	Alimentation électrique (V/Hz)		220-240/50	220-240/50
	Courant électrique (A)		0.98	0.98
Caractéristiques de performance	Capteur de température		NTC	NTC
	Consommation électrique (kWh/24h)		0.99	0.5
Dimensions	Capacité (L/Cu.Ft)		85/3.0	85/3.0
	Poids net/brut (approx.)	kg	36 / 41	33 / 38
		lbs	79.4 / 90.4	72.8 / 83.9
	Dimension intérieure (L*P*H)	mm	405*405*555	405*405*555
		in	15.9*15.9*21.9	15.9*15.9*21.9
	Dimension extérieure (L*P*H)	mm	495*550*740	495*550*740
		in	19.5*21.7*29.1	19.5*21.7*29.1
	Dimensions de l'emballage (L*P*H)	mm	590*650*830	590*650*830
		in	23.2*25.6*32.7	23.2*25.6*32.7
Alarmes	Chargement de conteneur (20'/40'/40'H)		54/120/180	54/120/180
	Température haute/basse		Y	Y
	Haute température ambiante		Y	Y
	Porte entrouverte		Y	Y
	Panne de courant		Y	Y
	Batterie faible		Y	Y
	Erreur de capteur		Y	Y
	Défaut de communication		Y	Y
	Chaleur du condenseur		N	N
	Alarme à distance		Y	Y
Accessoires	Alarme sonore et visuelle		Y	Y
	Roulette		2	2
	Pied		2	2
	Hublot		1	1
	Étagères/Tiroirs		2/1	2/1
	Imprimante		N/A	N/A
	Enregistreur de graphiques		N/A	N/A
	Interface USB		En option	En option
	RS485		En option	En option
Matériau	Matériau extérieur (mm)		Acier verni	Acier verni
	Matériau intérieur		Polystyrène	Polystyrène
	Épaisseur de la porte (mm)		50	50
	Épaisseur de l'armoire (mm)		45	45
	Matériau des étagères		Fil d'acier, recouvert de plastique	Fil d'acier, recouvert de plastique
	Modèle de réfrigérant		R600a, 45g	R600a, 45g
Autres	Certification		CE, UKCA, DIN13277 (En option)	CE, UKCA, DIN13277 (En option)

*Haier Biomedical se réserve le droit de modifier les produits et les spécifications sans préavis.